




Harvard PremiumFlow⁺

Nano-Optimized Hybrid Flowable Composite
für **posteriore** und **anteriore** Restaurationen




Harvard PremiumFlow⁺ bietet eine optimale fließfähige Konsistenz und eine exzellente Hochglanzpolierbarkeit. Der geringe Polymerisationsschrumpf sorgt für eine hervorragende Randqualität und die geringe Abrasion sorgt für eine langlebige Versorgung. Mit Chamäleon Effekt für schöne ästhetische Restaurationen.

- Optimale, fließfähige Konsistenz
- Thixotrop
- Exzellente Hochglanzpolierbarkeit
- Schöne ästhetische Restaurationen
- Geringer Polymerisationsschrumpf
- Geringe Abrasion
- Verbesserte mechanische Eigenschaften
- Chamäleon Effekt

Optimale fließfähige Konsistenz.

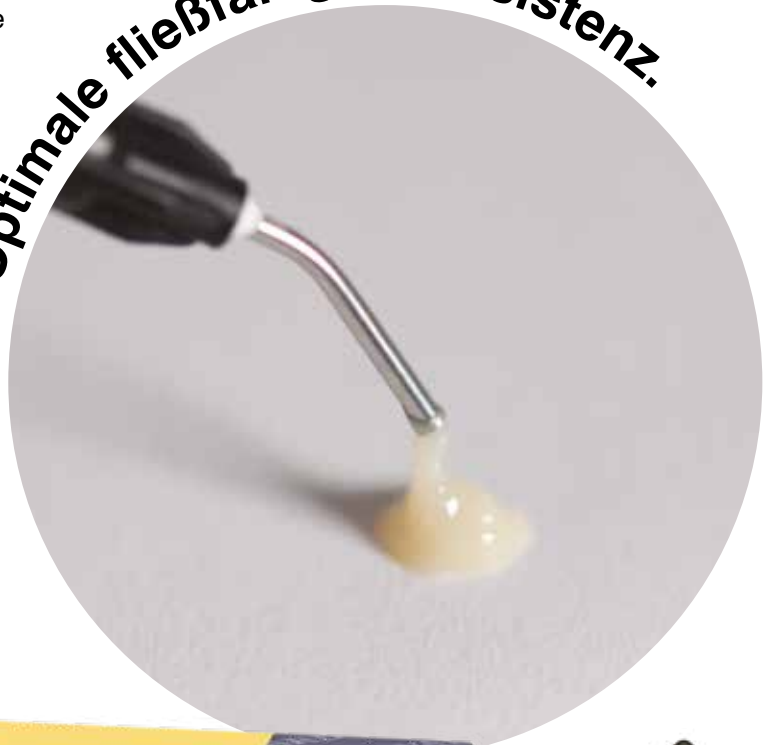

Physikalische Eigenschaften

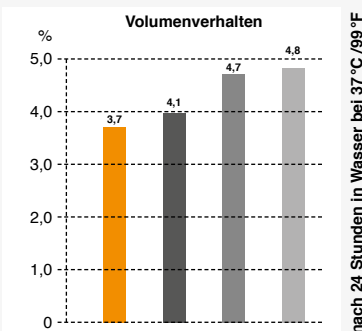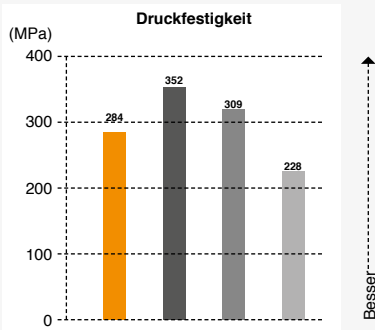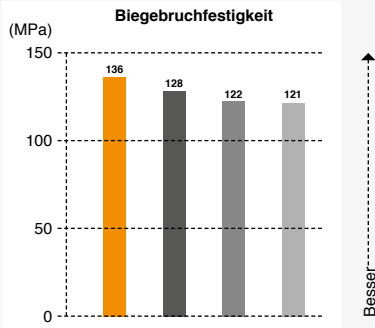

- Harvard PremiumFlow
- Grandio Flow (Voco)
- Filtek Supreme XT Flow (3M)
- TetricEvo Flow (Ivoclar Vivadent)

Kontrolliertes fließen!



Harvard PremiumFlow ⁺ hat eine „standfeste“ Konsistenz bei der Platzierung, dank seiner thixotropen Eigenschaften fließt es, sobald es bewegt wird. Diese unentbehrliche Eigenschaft sorgt für eine einfache Applikation.

Vor und nach der Restauration




Vorher

Nachher

Perfekte Fließeigenschaften zum Aufbau anspruchsvoller anatomischer Formen (z. B. incisale und cervicale Restaurationen).

Anwendung

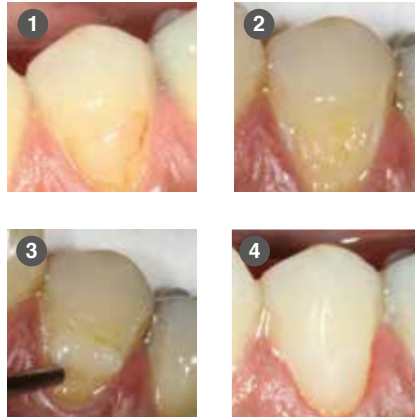

1. Defekte Füllung
2. Nach dem Entfernen Ätzen und Bonden
3. Applikation von **Harvard PremiumFlow** ⁺
4. Polierte Füllung

Technische Daten Harvard PremiumFlow ⁺

Biegebruchfestigkeit	136 MPa
Diametrale Zugfestigkeit	53 MPa
Druckfestigkeit	284 MPa
Elastizitätsmodul	5,2 GPa
Barcol Härte	76
Schrumpf (Volumen) nach 24 Stunden	3,7 %

Artikelinformationen

Harvard PremiumFlow ⁺

Farbe	Spritze 2 x 1 ml	OptiTips® 20 x 0.25 g
A1	7082600	7082700
A2	7082601	7082701
A3	7082602	7082702
A3.5	7082603	7082703
B2	7082607	7082704

* inkl. 8 needle tips H18

Harvard NeedleTips H18 7095158
Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

Harvard Applier OptiTips® 7095200

Harvard PremiumFlow

Farbe	Spritze 2 ml
A1	7082211
A2	7082212
A3	7082213
A3.5	7082214
B2	7082215

* inkl. 6 needle tips H17

Harvard NeedleTips H17 7095157
Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

Harvard ErgoGrip 7082220
nur für 2 ml Spritze erforderlich

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

11034_DE_02/19

Harvard Vertriebspartner.

www.harvard-dental.de