



Stiftbefestigung & Stumpfaufbau.

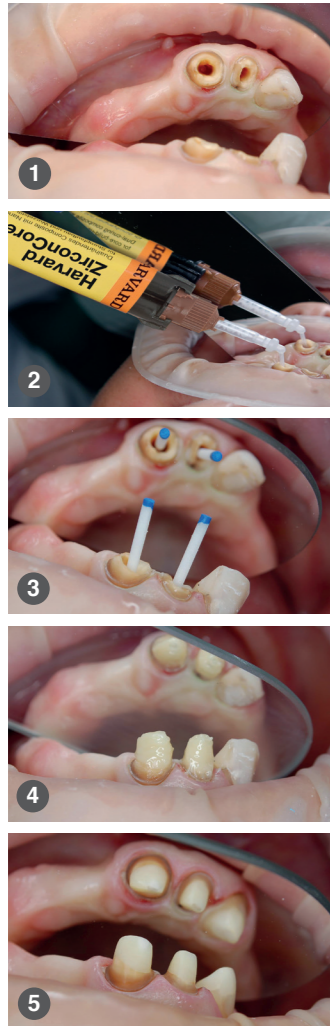


1. Aufbereiteter und gebondeter Wurzelkanal
2. Applikation im Wurzelkanal
3. Platzieren des Wurzelstiftes
4. Ausgehärteter Stumpfaufbau
5. Polierter Stumpfaufbau

Physikalische Eigenschaften.

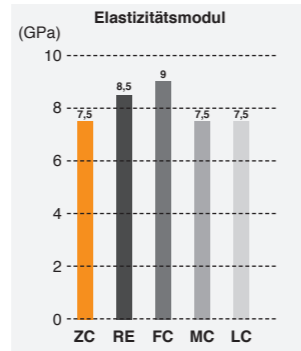


(Lichthärtung bzw. Dualhärtung)

ZC Harvard ZirconCore
RE Voco Rebilda
FC Dentsply FluoroCore 2+

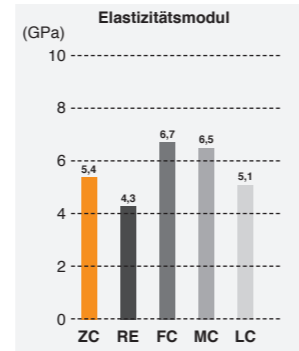

(Dunkelhärtung)

MC Ivoclar Vivadent MultiCore Flow
LC DMG LuxaCore Z Dual Automix

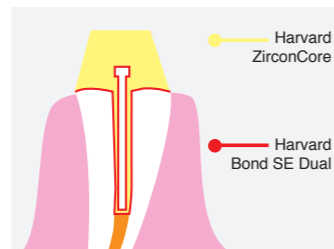

Exzellente mechanische Eigenschaften in allen Aushärtungsarten.

Technische Daten

Verarbeitungszeit bei 23°C	1:30 Min.
Abbindezeit (Selbsthärtung)	3:30 Min.
Lichthärtung (optional)	40 Sek.

Beschleifen ohne Stufe.



- Ausgezeichnete Konsistenz für zwei Indikationen: **Wurzelstiftbefestigung und Stumpfaufbau**
- Optimale thixotrope Eigenschaften
- Optimale Härte: „**Beschleifbar wie Dentin**“, (Vermeidung von Stufen beim zirkulären Beschleifen)
- Sehr gute mechanische Eigenschaften für dauerhafte Restaurationen
- Enthält Nano-Zirkoniumdioxid
- Dualhärtend
- Fluoridfreisetzung
- Sehr gute Röntgenopazität
- Selbstanmischendes Material aus der Minimix-Spritze
- Für optimale Ergebnisse zu verwenden mit dem Adhäsiv **Harvard Bond SE Dual**

Artikelinformationen

	Bestell-Nr.
Harvard ZirconCore 5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen, 10 intra tips long, in der Farbe A3	7083600
Harvard Mini 1:1 O-Brown Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen	7083610
Harvard IntraTips long Nachfüllbeutel mit 50 intra tips long	7083620
Harvard Bond SE Dual 2 x 5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten	7083602
Harvard Bond SE Dual Refill 2 x 5 ml Flasche	7083605



Wir empfehlen dazu **Harvard Bond SE Dual**: Das dualhärtende, selbstätzende Adhäsiv

HARVARD®


Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Tel.: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

11015_DE_02/19

Harvard ZirconCore

Dualhärtendes Composite mit Nano-Zirkoniumdioxid. Für Stumpfaufbau und Wurzelstift-Zementierung.

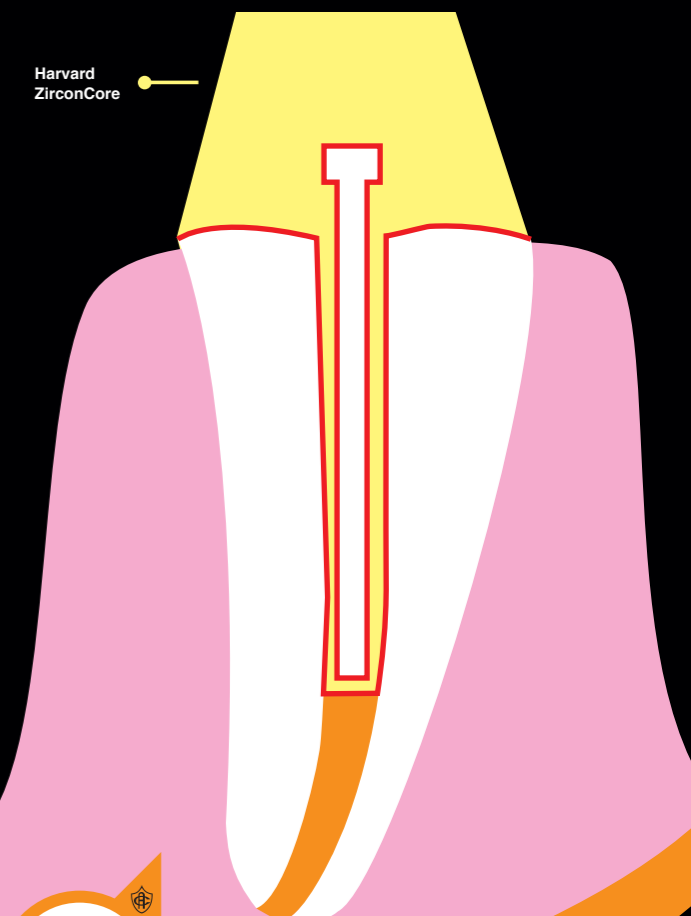

Bewerten Sie uns!*

1. Lichthärtende Composite, Bondings und Liner



WELT-NEUHEIT!
Harvard UltraFill

Harvard PremiumFill



WELT-NEUHEIT!
Harvard UltraFill Flow

Harvard PremiumFlow




NEU
Harvard Inter-Lock® ONE
Universal Adhesive

Harvard Inter-Lock®

Harvard Bond SE Mono

Harvard IonoLine

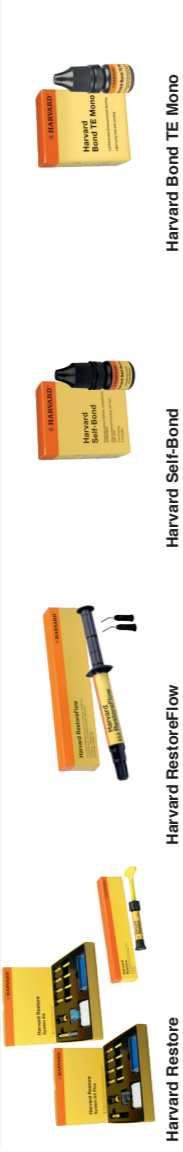

Harvard Restore

Harvard RestoreFlow

Harvard Self-Bond

Harvard Bond TE Mono



Harvard Etch

Harvard CalciumHydroxide LC

Harvard Bond SE Dual

Harvard LuteCem SE

2. Dualhärtender Stumpfaufbau und Stiftbefestigung



Harvard ZirconCore

NEU
Harvard Inter-Lock® ONE
Self Cure Activator

Harvard Bond SE Dual

Harvard LuteCem SE

3. Endodontie, MTA



Harvard MTA XR
Flow Fast OptiCaps®

Harvard MTA XR Flow EWT
OptiCaps® & EndoDirect Spritze

Harvard MTA XR
Fast OptiCaps®

Harvard MTA XR
OptiCaps®

4. Temporäre Materialien



Harvard MTA (Universal) OptiCaps®

Harvard MTA (Universal) HandMix

Harvard CalciumHydroxide

Harvard Implant Semi-permanent



Harvard TEMP C&B

Harvard TEMP Glaze LC

Harvard TEMP Cem Esthetic

Harvard TEMP Cem EasyDose®

5.1 Zink Oxid Befestigungszemente



Harvard Phosphat Cement

Harvard Cement OptiCaps®

Harvard Polycarboxylat Cement

5.2 Glasionomer Zemente für Füllungen



Harvard Ionomer Fill Extra

Harvard Ionomer Prime LC

Harvard Ionomer Fill LC




Harvard Ionomer Fill Extra

Harvard Ionomer Cem Extra

Harvard Ionomer Cem LC

5.3 Glasionomer Zemente für Befestigungen

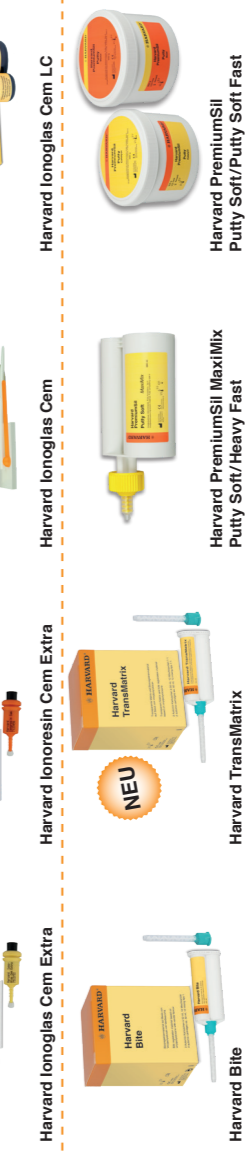

Harvard Bite

NEU
Harvard TransMatrix

Harvard PremiumSil MaxMix
Putty Soft/Heavy Fast

Harvard PremiumSil
Putty Soft/Heavy Fast



Harvard PremiumSil Light

Harvard PremiumSil Medium

Harvard PremiumSil Heavy

Harvard PremiumSil Light/Fast, Medium/Medium Fast, Mono/Mono Fast, Heavy/Heavy Fast



Harvard TraySive

* Schön, dass Sie unser Produkt getestet haben. Hat es Ihnen gefallen? Ihre Bewertung ist uns sehr wichtig. Bitte nutzen Sie den QR-Code oder unsere Webseite unter www.harvard-dental.de/feedback Testen lohnt sich: Sichern Sie sich als Belohnung ein weiteres Testprodukt aus unserem Programm. Vielen Dank für Ihre Zeit.

Bewerten Sie uns!*

