



HARVARD®


Harvard Implant

Speziell für Implantatkronen und -brücken



Dualhärtender Zement zur langzeitprovisorischen Befestigung implantatgetragener Kronen und Brücken

- Sichere Befestigung bei leichter Entfernbareit und leichter Rezentierung
- Elastischer Polymerfilm, der die Kaudruckung auf den Knochen verringert
- Exzellente Versiegelung, kein Schrumpf
- Leichte Entfernbareit von Materialüberschüssen
- Enthält Zinkoxid

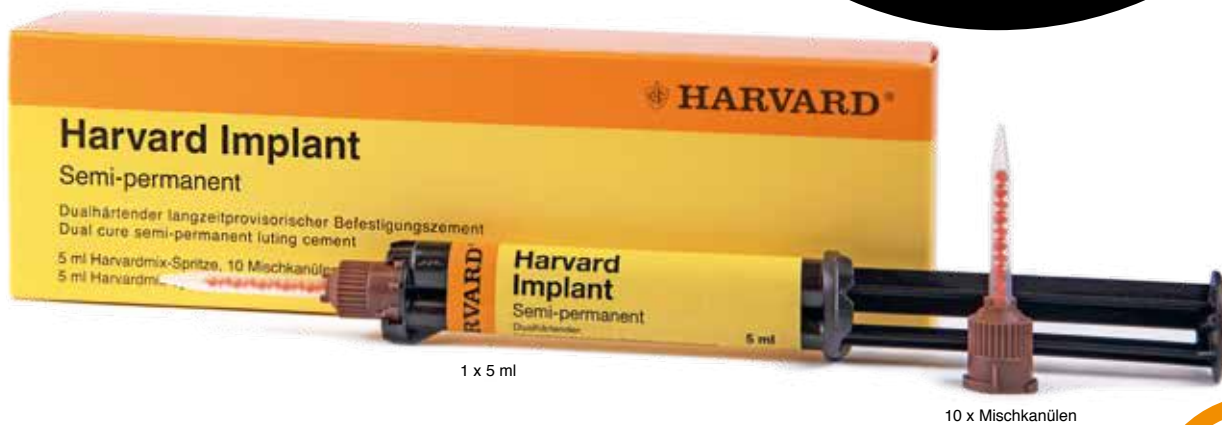



DE

Perfekter Zement für die Befestigung auf Abutments.



1. Implantat-Abutments
2. Befüllen der Restauration mit Harvard Implant
3. Lichthärtung
4. Harvard Implant Überschüsse
5. Einfaches Entfernen von Überschüssen
6. Implantate mit Suprakonstruktion


Physikalische Eigenschaften

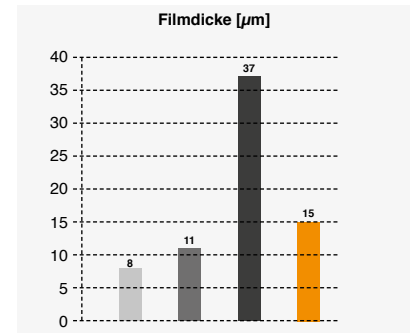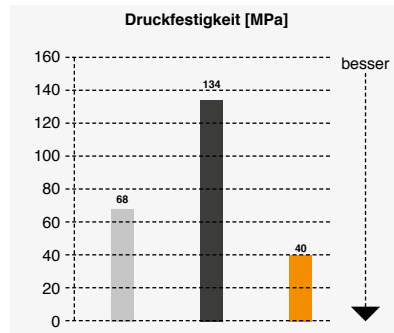

■ Detax Implantlink semi
■ Ivoclar Vivadent Telo CS Cem Implant
■ Harvard Implant Semi-Permanent

■ Detax Implantlink semi
■ Premier Dental Premier Implant
■ Ivoclar Vivadent Telo CS Cem Implant
■ Harvard Implant Semi-Permanent

Kein Schrumpf + optimale Filmdicke = Kein Randspalt UND perfekte Fixierung!

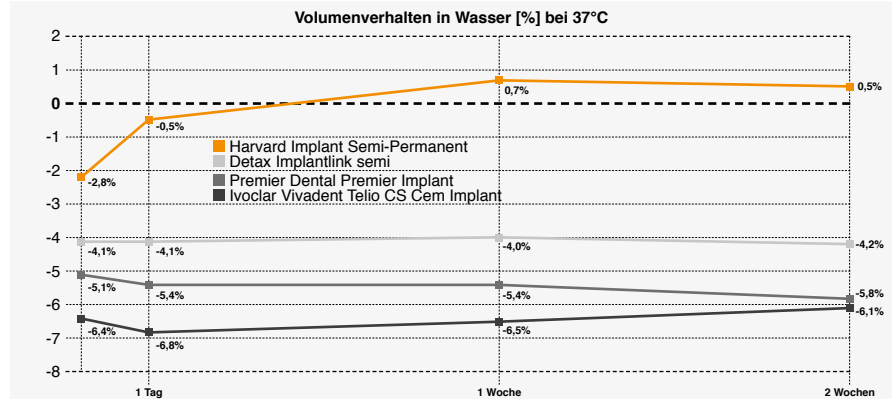

Die sichere, semi-permanente Befestigung

Harvard Implant Semi-permanent ermöglicht durch die selbst-anmischende Minimix-Spritze eine exakte Dosierung der benötigten Zementmenge. Überschüsse lassen sich nach kurzem Angelieren mittels LED-Lampe mühelos und vollständig abziehen. Auch größere Restaurationen lassen sich jederzeit problemlos entfernen. Langes und umständliches Versäubern nach dem Abnehmen entfällt.

Oxana Hilfer, Zahnärztin Fulda



Artikelinformationen

Harvard Implant Semi-permanent
5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen

Harvard Mini 4:1 / 10:1 S-Brown
Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

Bestell-Nr.

7081400

7093050

Technische Daten

Druckfestigkeit 40 MPa
 Filmdicke 15 µm
 Verarbeitungszeit 2:00 Min.
 Abbindezeit (Selbsthärtung) ca. 4:00 Min.
 Lichthärtung, je Fläche 20 Sek.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen. Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten. Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
 Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
 Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
 Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
 info@harvard-dental-international.de