



HARVARD®

Harvard UltraFill

Das Composite für anteriore und posteriore Restaurationen.



Harvard

UltraFill Flow



Made in Germany

DE

Schöner Hochglanz. Auch nach Monaten.

>> **Perfekte ästhetische Ergebnisse mit der Multi Opacity Schichttechnik.** <<

Schließen eines Diastemas, Andreas Kluschke MSc., ZA Hamburg Smile, Hamburg



Vorher



Nach 6 Monaten

>> **Klasse IV Restauration Schneidezahn 11: Für diesen anspruchsvollen Fall habe ich entschieden, Harvard UltraFill zu verwenden.** <<



Dr. Pawel Paszkiewicz, Estetique Clinic, Polanica Stroj, Poland



- 1.: Ausgangssituation mit Frontzahn Fraktur.
- 2.: Entfernen des alten Composites, Silikonabformung.
- 3.: Palatinal wurde eine Schale anmodelliert als Grundlage für die Restaurierung.
- 4.: Mamelons wurden mit Dentin Composite aufgearbeitet (90% Opazität – Harvard UltraFill A1 D).
- 5.: Finale Schicht auf die Mamelons mit

Schmelzopazität (80% Opazität – Harvard UltraFill A1 E) und einer Inzisalkante aus Harvard UltraFill INC.

6.: Nach der anatomischen 3D Korrektur.



Perfekter Randschluss vor und nach Belastung im Kausimulator und durch Thermocycling TC
Harvard InterLock/Harvard UltraFill,
Prof. Kunzelmann, LM Universität München

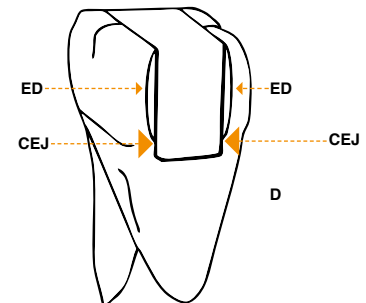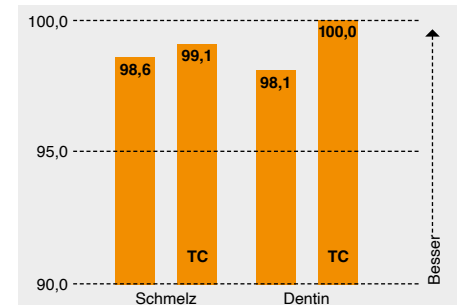

CEJ: Cementum-Enamel Junction

>> **Einfach, schnell und glänzend.**

Tolles hochglänzendes Ergebnis mit Harvard UltraFill Universal Opacity. <<

Klasse V Restauration, Andreas Kluschke MSc., ZA Hamburg Smile, Hamburg



Vorher



Nach 6 Monaten

>> **Perfekter Randschluss.** <<


Klasse I Restauration, Dr. Pawel Paszkiewicz

Vorher

Nachher




Intuitive Farbkennzeichnung.

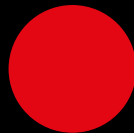


Dentin Opacity

Dentin Farben für die Multi Opacity Schichttechnik.

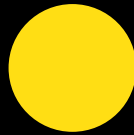


Enamel Opacity

Enamel Farben für die Multi Opacity Schichttechnik.

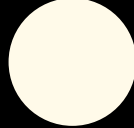

Transpa Opacity

Incisial INC oder andere transluzente Farben T für die Multi Opacity Schichttechnik.

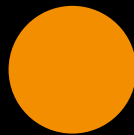

Universal Opacity

Farben mit einer mittleren Opazität, für einfaches Schichten.



2

verschiedene
Opazitätskonzepte

Ein neues Hochleistungs-Composite mit herausragenden Eigenschaften

- Überragendes Handling
- Leicht zu verarbeiten
- Einfache Polierbarkeit – dauerhafter Hochglanz
- Opaleszenz, zahnähnliche Fluoreszenz, Chamäleon Effekt
- Sehr gute Röntgenopazität
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Optimale physikalische Eigenschaften
- Anorganische Füller kleiner als 0,2 μm
- Erhältlich in der 3 g Spritze und in OptiTips®

Pure Ästhetik im neuen Glanz.

1. Multi Opacity Schichttechnik

Perfekte ästhetische Ergebnisse mit Harvard UltraFill Multi Opacity. Mit diesem opalisierenden Hochleistungscomposite lassen sich alle anspruchsvollen Restaurationen lösen. Harvard UltraFill ist in mehreren Farben verschiedener Opazitäten erhältlich.

Full Art! Für hochästhetische Restaurationen.



Multi Opacity Schichttechnik

D
Dentin Opacity

E
Enamel Opacity

T/INC
Transpa/Incisal Opacity

Einfach und effizient.


2. Universal Opacity

Einfaches schichten mit Harvard UltraFill Universal, tolle Hochglanzergebnisse bei geringem Zeiteinsatz.

Ausgewählte Farben in einer Opazität.

Universal Opacity

oder

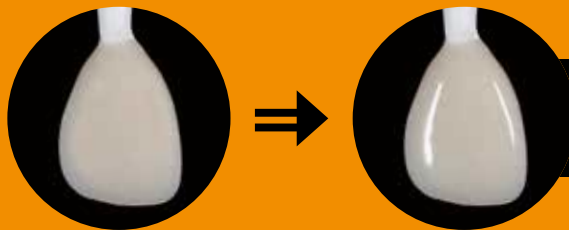

U

Universal Opacity



Harvard UltraFill

Ultra Gloss, Opalescent, High Performance Composite Restorative
für **anteriore** und **posteriore Restaurationen**

- Dauerhafter Hochglanz
- Opaleszenz
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Leicht zu verarbeiten
- Überragende Handlungseigenschaften
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Hohe Abrasionsfestigkeit
- Optimale physikalische Eigenschaften
- Röntgenopak

Multi Opacity Schichttechnik

- Mehrere Farben in **verschiedenen** Opazitäten
- Exzellente, dauerhafte Ästhetik
- Chamäleon Effekt



Universal Opacity einfache Technik

- Ausgewählte Farben in **einer** Opazität
- Bester Kompromiss der Opazität in 80 % der klinischen Situationen



IntroKit S – 3 x 3 g



OptiTips® 0.25 g

HARVARD EMPFEHLUNG

Harvard InterLock® ONE

Universal Adhesive

- **Universal:** passend für alle Zahnkonditionierungstechniken: mit oder ohne Ätzelgel, nass oder trocken
- Nur eine dünne Schicht notwendig
- Hohe und reproduzierbare Haftkraft an Schmelz und Dentin auch unter Langzeitstress
- Wirksame Randabdichtung für geringes Risiko postoperativer Sensibilität
- Ausgezeichnete Leistung auch mit selbst- oder dualhärtenden Compositen
- Bequeme und präzise Anwendung durch die ergonomische Dreiecksflasche mit definierter Tropfengröße

Wenn die Lichthärtung von **Harvard InterLock® ONE** nicht sichergestellt werden kann, können Sie **Harvard Bond SE Dual** verwenden.



3 g

Harvard UltraFill Flow


Ultra Gloss, Opalescent, Flowable Composite Restorative
für **anteriore** und **posteriore** Restaurationen

- Leicht zu polieren, **dauerhafter Hochglanz**
- Opaleszenz
- Optimale fließfähige Konsistenz
- Thixotrop
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Reduzierte Polymerisationsschrumpfung
- Hohe Abrasionsfestigkeit
- Optimale physikalische Eigenschaften
- Leicht zu verarbeiten
- Röntgenopak

- Erhältlich im ComforTip® F



Besonders
komfortabel mit dem
schwenkbaren
Harvard
ComforTip® F

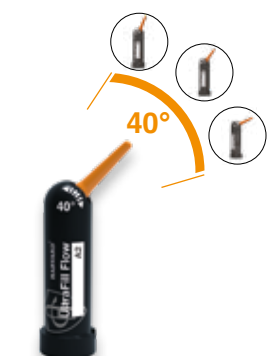

ComforTip® F 0.25 g



20 x 0.25 g

>> Leicht und
schnell zu polieren,
dauerhafter Hoch-
glanz. <<

Zahn 14 und 15 keilförmige Defekte



Vorher

Klasse V Restaurationen nach
Hochglanzpolitur




Nach 6 Monaten



Andreas Kluschke MSc.,
ZA Hamburg Smile, Hamburg



Fakten, die für sich sprechen. Physikalische Eigenschaften:

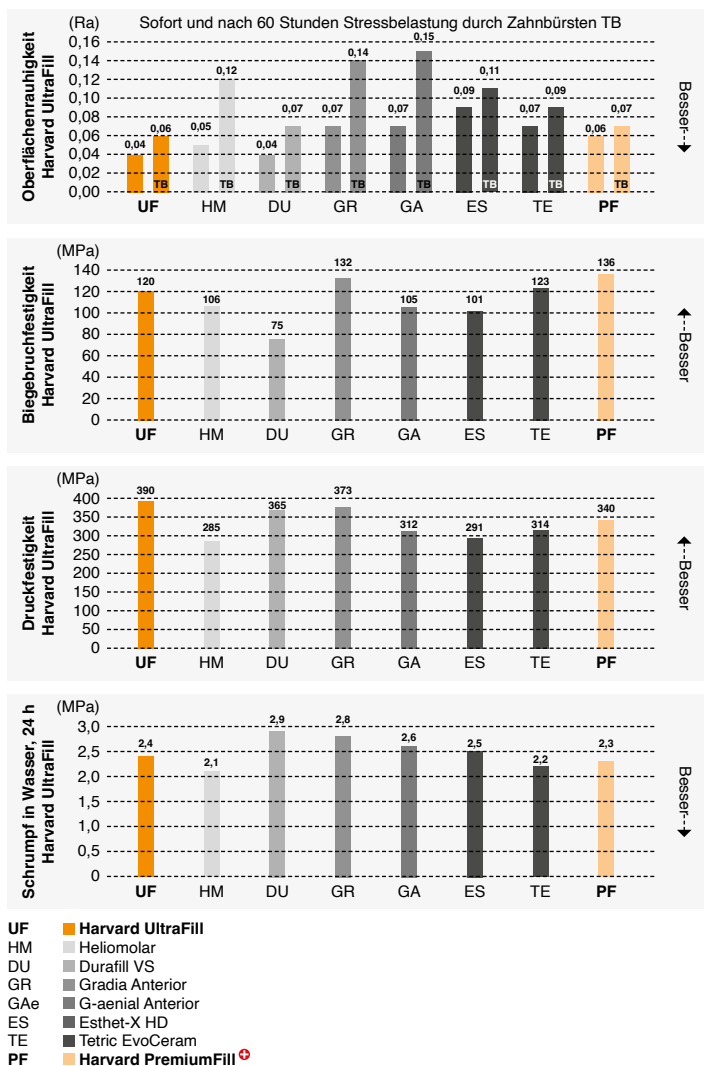

Bestellinformationen:

Multi Opacity Schichttechnik

Harvard UltraFill „Multi Opacity“		
Farbe	3 g Spritze	
A1 E		7131111
A1 D		7121111
A2 E		7131112
A2 D		7121112
A3 E		7131113
A3 D		7121113
A3.5 E		7131114
A3.5 D		7121114
BL E		7131153
BL D		7121152
INC		7141160
T		7141170

Universal Opacity einfache Technik

Harvard UltraFill „Universal Opacity“		
Farbe	3 g Spritze	20 x 0.25 g OptiTips®
A1 U	7111111	7111211
A2 U	7111112	7111212
A3 U	7111113	7111213
A3.5 U	7111114	7111214
BL U	7111151	

Kits	
Harvard UltraFill „Universal Opacity“ IntroKit S	7175100
3 Spritzen à 3 g, A2 U, A3 U, A3.5 U	

Harvard InterLock® ONE	
Universal Adhesive 5 ml Flasche	7083611

Harvard UltraFill Flow		
Farbe	2 x 1 ml Spritze	20 x 0.25 g Comfortip® F
A1	7112111	7112211
A2	7112112	7112212
A3	7112113	7112213
A3.5	7112114	
B1	7112121	
BL	7112151	
	inkl. 8 Needle Tips H18	

Harvard NeedleTips H18	7095158
Nachfüllbeutel mit 50 Needle Tips	
Harvard Applier OptiTips®	7095200

Harvard Applier OptiTips®	7095200
---------------------------	---------

Weitere Farben und Varianten sind möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de



www.harvard-dental.de